

5. Технічні дані



Модель:	FY-6E
Напруга / частота:	220 Вг / 50 Гц
Частота вібрації	2600–3200 оборотів.
Час використання	30 хвилин.
Потужність:	20 W

6. Чистка і догляд.

1. Витираєти лише сухими ганчірками.
2. Тримайте подалі від дітей. Зберігати в упаковці.

Точки спини людини.

Порівняння точок акупунктури для ефективного масажу.

-
1. Втомленість
 2. Нежить
 3. Біль у шії/
Хребці шії
 4. Гіпертонія
 5. Безсоння
 6. Збільшення енергії
 7. Збільшення потенції (для чоловіків)
 8. Збільшення сексуальності (для жінок)
 9. Геморой
 10. Запалення колінного суглобу
 11. Заклякла шия
 12. Астма
 13. Параліч
 14. Запалення плечового поясу
 15. Хвороби шлунку
 16. Хвороби спини (гострі та хронічні)
 17. Втомлюваність ніг
 18. Діарея, запор
 19. Запалення сідлищий нерву
 20. Енурез/ ніктурія

Comfortech™

Багатофункціональний ручний масажер

Інструкція по експлуатації

FY-6E




(регулятор плавної зміни швидкості)

Перед початком застосування, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію.

1. Функція.

- 1) Розслабляє утомлені м'язи.
- 2) Знімає неприємне відчуття від поганого кровообігу.
- 3) Знімає біль з плеч.
- 4) Знімає напруження від роботи.
- 5) З допомогою масажеру покращується кровообіг та працездатність органів.

3. Як використовувати:

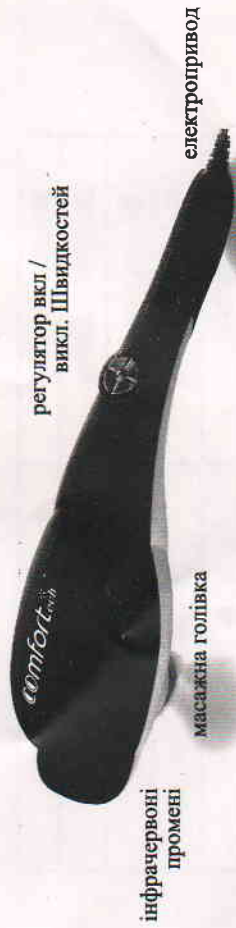

1. з'єднати з електроживленням
2. Увімкніть, з допомогою кнопки регулятора можливо змінити інтенсивність масажу.
3. після використання необхідно відімкнути від електроживлення.

2. Застосування:



плечі



руки



спина



талія



стегно



стопа

4. УВАГА!

- 1) обов'язково відключити від електромережі, коли проведете чистку.
- 2) не можна використовувати масажер коли ви спите.
- 3) діти використовують масажер лише при догляді дорослих.
- 4) час одноразового використання не більше 30 хв. Довго масажувати на кожному місці не бажано.
- 5) неможна масажувати безпосередньо голову, груди, кістки.
- 6) самі не намагайтесь провести ремонт даного товару.

Людина, яка знаходиться в стадії лікування, або мають місце наступні випадки, перед використанням повинна проконсультуватися у лікаря:

1. дерматоз
2. перелом
3. на спині є нестандартні взуття або вигини
4. дуже важкий порок серця
5. висока температура, високий кров'яний тиск